



modelo 751



modelos
752, 753 e 754

Agitadores magnéticos

Sem aquecimento

Os agitadores magnéticos Fisatom geram uma agitação uniforme em líquidos, por meio das barras magnéticas em PTFE inseridas no recipiente. Fabricado em alumínio injetado e acabamento em pintura epóxi garantindo uma maior durabilidade e robustez, tampa de alumínio com controle eletrônico linear de rotação e lâmpada piloto.

Contate-nos




☎ (11) 3864-1333

📞 (11) 96477-1333

✉ vendas@fisatom.com.br

www.fisatom.com.br

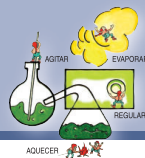

Especificações

Modelo	751 *	752	753	754
Agita até	1 L	6 L	12 L	20 L
Ø da tampa	10 cm	14 cm	18 cm	18 cm
Altura	4,5 cm	10 cm	11,5 cm	13 cm
Faixa de rotação (r/min)	20 a 1.200	100 a 1.800	100 a 1.800	120 a 1.500
Potência	5 W	25 W	40 W	60 W
Acompanha barras magnética (Ø x comp. mm)	9 x 25	9 x 25	9 x 25 11 x 37 11 x 52	11 x 52 13 x 65 14 x 75
Grau de proteção	IP63	IP23	IP23	IP23
Frequência	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Tensão	115 ou 220 V	115 ou 220 V	115 ou 220 V	220 V
Código em 115 V	007511	007521	007531	-
Código em 220 V	007512	007522	007532	007542

* Totalmente eletrônico, sem componentes móveis

Acessórios

Opcionais

- Barras magnéticas de diversas dimensões e Pescador de barras;
- Haste traseira de 30cm, que facilita a fixação de pinças e mufas;
- Pinças e mufas.