



modelo 502-2 e 503-2

## Placas aquecedoras duplas

Até 360 °C

As Placas Aquecedoras Fisatom, fabricadas em alumínio injetado inquebrável, com resistência blindada acoplada, possibilitam uma temperatura uniforme por toda a extensão da placa. Possuem controle individual de temperatura por termostato capilar de 50 a 360 °C\* com lâmpada piloto. Corpo fabricado em aço revestido em pintura epóxi e cabo trifilar em borracha, atendendo a norma IEC (evita danos caso encoste na placa aquecedora).



A temperatura do produto depende de calor específico e da quantidade.

### Contate-nos




(11) 3864-1333

(11) 96477-1333

vendas@fisatom.com.br

www.fisatom.com.br

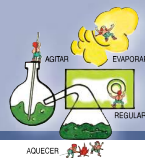

## Especificações

Modelo	502-2	503-2
Temperatura da placa	50 a 360 °C	50 a 360 °C
Potência	1.300 W	2.100 W
Provas	2 x 1 L	2 x 2 L
Dimensões (L x P x A)	34 x 20 x 10,5 cm	42,5 x 21 x 10,5 cm
Tensão	115 ou 230 V	230 V
Frequência	50–60 Hz	50–60 Hz
Grau de proteção	IP23	IP23
Código em 115 V	050221	n/d
Código em 230 V	050222	050322